




URINABLEITUNGSFLASCHE

URINSAMMELSYSTEM

ZUR VERWENDUNG MIT FOLEY-DAUERKATHETERN, MÄNNLICHEN EXTERNEN KATHETERN UND UROSTOMIE-ANWENDUNGEN


GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE
FÜR PRODUKT #4100

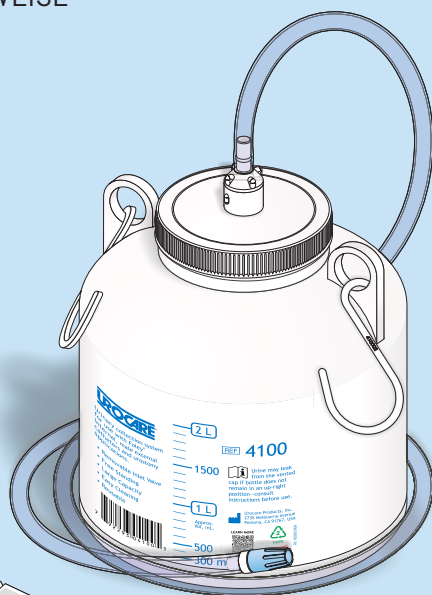

KIT-INHALT:



- 1 Langlebige Urinärableitungsflasche (Nr. 410001)
 - 1 Flaschendeckel mit Gehäuse (Nr. 4101)
 - 1 Ableitungsschlauch 60" (1,5 m) mit Adapter & Kappe (Nr. 6061)
 - 1 Verstellbare Schlauchklemme (Nr. 6999)
 - 1 Urinableitungsflaschen-Adapter (Nr. 6003)
 - 1 „HOCHFLUSS“ Rote Rückflussventil (Nr. 6001)
 - 1 Großer Dichtungsring (Nr. 6000)
 - 1 Paar Haken zum Aufhängen (Nr. 4102)
- Illustrierte Gebrauch- und Pflegehinweise

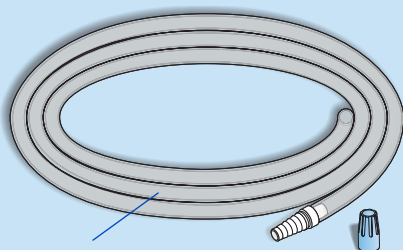

Nr. 6061 Drainageschlauch aus klarem Vinyl mit abgestuften Adapter und Kappe




Nr. 6999 Verstellbare Schlauchklemme

Nr. 6003 Urinableitungsfaschen-Adapter



Nr. 6001 „HOCHFLUSS“ Rote Rückflussventil

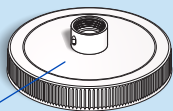

Nr. 4101 Flaschendeckel mit Gehäuse

Nr. 410001 Urinableitungsfasche (nicht separat verkauft)



ABBILDUNG 1
FLASCHENMONTAGE



Wenn die Flasche nicht aufrecht steht, kann Urin aus der belüfteten Kappe austreten.

Wenn das rote Rückflussventil fehlt oder entfernt wurde, können Lecks rund um das obere Ventilgehäuse in der Mitte der Kappe auftreten. Um Lecks zu vermeiden, ist die Verwendung des mitgelieferten Dichtungsring (#6000) erforderlich, um die Gehäusegewinde abzudichten.


Nr. 6000 Schwarzer Dichtungsring Austausch für Rückschlagventil bei Nichtgebrauch.



Nr. 6003 Urinableitungsfaschen Adapter


Nr. 6001 „HOCHFLUSS“ Rote Rückflussventil

WICHTIG: Um Abflussprobleme zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Informationen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit der Funktionsweise und der richtigen Wartung vertraut.

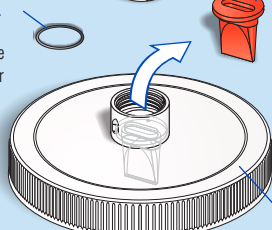

Nr. 4101 Flaschendeckel mit Gehäuse

ABBILDUNG 2
DETAIL DES OBEREN VENTILGEHÄUSES

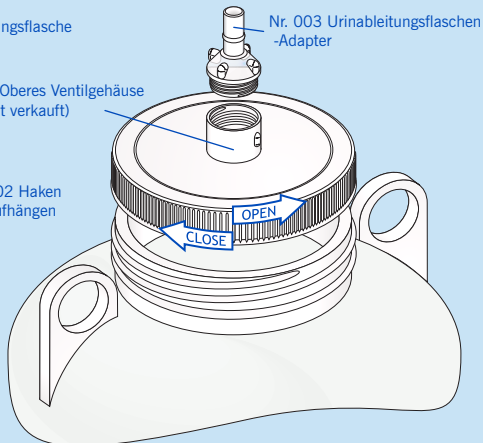

Nr. 003 Urinableitungsfaschen-Adapter

Nr. 603005 Oberes Ventilgehäuse (nicht separat verkauft)

Nr. 4102 Haken zum Aufhängen

ABBILDUNG 3
NAHAUFNAHME DES FLASCHENDECKEL

Um den Urinableitungsfaschen-Adapter (Nr. 6003) vom Flaschendeckel zu entfernen, entfernen Sie den Schlauch (Nr. 6061), halten Sie das Gehäuse (Nr. 603005) fest und drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn. Um das Rückflussventil (Nr. 6001) zu entfernen, entfernen Sie den Deckel und schieben Sie das Ventil mit dem Finger von unten nach oben durch das Gehäuse.

Überprüfen Sie das Ventil auf sichtbare Anzeichen von Beschädigung, Verformung oder festsitzenden Lippen. Drücken Sie die Seiten des Ventils vorsichtig zusammen, bis es sich öffnet. Beim Loslassen sollten sich die Ventillippen flach schließen. Um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, stellen Sie sicher, daß alle Teile vor der Wiederverwendung wieder richtig zusammengebaut sind – siehe Abbildung 2.

WICHTIG! LESEN SIE DIES ZUERST:

Um mögliche Abflussprobleme zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch. Die Flasche muß während der Verwendung immer in aufrechter Position bleiben. Wenn sie gezogen oder umgekippt wird, kann Urin aus dem belüfteten Flaschendeckel austreten.

Da das rote Rückflussventil (Nr. 6001) zwei Zwecke erfüllt: erstens als Rückschlagventil und zweitens als Dichtung, um Leckagen zu verhindern. Es ist wichtig, daß das Ventil während des Gebrauchs an Ort und Stelle bleibt. Wenn die Verwendung des Rückschlagventils nicht gewünscht wird, ist ein Dichtungsring (Nr. 6000) erforderlich, um die Gewinde des oberen Ventilgehäuses abzudichten und Leckagen zu verhindern.

ZUR VERWENDUNG MIT FOLEY-DAUERKATHETERN:

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Kappe vom kegelförmigen Adapter am durchsichtigen Vinyl-Ableitungsschlauch (Nr. 6061)—siehe Abbildung 1. Befestigen Sie das Auslassende des Foley-Dauerkatheters am kegelförmigen Adapter am Ableitungsschlauch.

SCHRITT 2: Befestigen Sie das gegenüberliegende Ende des durchsichtigen Vinyl-Ableitungsschlauch am Urinableitungsflasche Adapter. (Nr. 6003).

SCHRITT 3: Setzen Sie das Rückflussventil (Nr. 6001) in das obere Ventilgehäuse des Flaschendeckel (Nr. 4101) ein—siehe Abbildung 2.

SCHRITT 4: Schließen Sie den Urinableitungsflaschen-Adapter (Nr. 6003) an das obere Ventilgehäuse (Nr. 603005) des Flaschendeckels (Nr. 4101) an und verbinden Sie dann den Flaschendeckel mit der Urinableitungsflasche (Nr. 410001)—siehe Abbildung 3.

ZUR VERWENDUNG MIT MÄNNLICHE EXTERNE KATHETER:

SCHRITT 1: Befolgen Sie die oben genannten Schritte 1 bis 4.

SCHRITT 2: Nachdem der Katheter, der Drainageschlauch, der Flaschendeckel und die Flasche miteinander verbunden sind, muß die verbleibende Luft im Katheter in die Flasche gedrückt werden. Dies stellt sicher, daß das Einlassventil (Rückschlagventil) ordnungsgemäß funktioniert und ein Siphon leichter erzeugt wird, wenn Urin abgegeben wird. Falls gewünscht, kann das System vor der Verwendung mit einfachem Leitungswasser vorgespült werden, um eine sofortige Siphon-Bedingung zu erzeugen.

IHRE URINABLEITUNGSFLASCHE SAUBER HALTEN:

Die beste Zeit, ein urinärerer Gerät zu reinigen, ist sofort nach der Benutzung. Nur spülen reicht nicht aus, um ein urinärerer Gerät zu reinigen. Die Verwendung von Essig, Bleichmitteln oder Toilettenreiniger verhärtet, verzieht und beschädigt Gummiteile, Latex und Plastik. Unangemessene oder unzureichende Reinigung kann irreparablen Schaden und Verfärbung der meisten Urinsammelsysteme verursachen... ganz zu schweigen von den unangenehmen und peinlichen Gerüchen.

Wir empfehlen die Verwendung des Urolux® Reinigers und Deodorants für Urin- und Stomageräte. Wenn diese konzentrierte Lösung mit Wasser gemischt wird, reinigt und desodoriert sie Urin- und Stomageräte. Kristallablagerungen werden aufgelöst und unangenehme Gerüche beseitigt.

Lassen Sie nicht zu, dass dies mit Ihrem Uringerät passiert!



- *Reinigt effektiv den gesamten Flüssigkeitsweg.*
- *Konzentrierte Formel reicht lange.*
- *Löst Ablagerungen von Harnkristallen auf.*

Urolux® wird in den folgenden Größen verkauft:

Artikel Nr. 700216 Standardgröße 16 fl. oz. (473 mL.) und

Artikel Nr. 700204 Kleine/Probegröße 4 fl. oz. (118 mL.)





VERWANDTE PRODUKTE

Urocare® Wiederverwendbare Latex-Beinbeutel

Uro-Safe® Einweg-Vinyl-Beinbeutel

Urocare® Urinaableitungsflaschen

Urinaireitungssysteme & Kits

Urinalsysteme und -Sets für Männer

Uro-Con® & Uro-Cath® Männliche Externe Katheter

Abflussventile & Adapter

Textile-Beinbeutelhalter & Beinbänder

Katheterbänder

Uro-Bond® Aufstrich-Silikonkleber

Urofoam® Klebender Schaumstreifen

Urocare® Kleberentferner-Tücher

Tracho-Foam® Klebeschaumscheiben

Uro-Prep® Schützende Hautbarriere-Tücher

Urolux® Uringerätsreiniger & Deodorant

Verbinder & Klemmen

Verlängerungs- & Abflussschlauche

DRI Excel™ & DRI Eclipse™ Bettnässer-Behandlungsalarme

Für weitere Informationen zu diesem oder anderen Urocare-Produkten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.urocare.com.

Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
Vereinigte Staaten



USA und Kanada: +1 (800) 423-4441
Außerhalb der USA: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com



**BITTE
RECYCLEN**



Hergestellt
in den USA

MEHR ERFAHREN



FORMULAR-NR.: P14100DE-68521102A