



UNIVERSAL CORREAS DE TELA PIERNA

Para el uso con la mayoría de vinilo, látex y caucho bolsas de orina pierna

- Proporciona un mejor ajuste encima correas estándares pierna látex
- Completamente ajustable sujetadores auto-agarre hacer una aplicación segura y simple
- Secciones elástico hacerlos flexibles y cómodos
- Duraderos, reutilizables y lavables a mano oa máquina

6390
Un Par

Se adapta a los tamaños de 20cm a 61cm

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
www.urocare.com o escribanos un correo electrónico.

Para realizar un pedido, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.

T: (909) 621-6013 • F: (909) 621-4436 • email: sales@urocare.com



SE RUEGA RECICLAR
Impreso en
papel reciclado

HECHOS EN
CHINA

PI6390ES-69601104D



¡IMPORTANTE! LEA ESTO PRIMERO:

Para obtener los mejores resultados, tome ciertas precauciones antes de usar estas correas. Asegúrese de que no hay costuras sueltas u otras irregularidades antes de cada uso. las personas con reacciones alérgicas conocidas a ciertos materiales (goma de neopreno especial) no deben usar estas correas. Suspnda su uso ante los primeros signos de la dermatitis o cualquier otro tipo de irritación de la piel y consulte a su medico inmediatamente.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado las correas; productos hechos con elástico y/o material de goma de neopreno puede—si incorrectamente aduste—causa la restricción de circulación o de ruptura de la piel; Sin embargo, una bolsa atada demasiado flojos pueden resbalar por la pierna y causar daños a Foley o catéteres externos masculinos de estiramiento. En caso de producirse alguna molestia mientras esté usando, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con un ajustador o un médico. Para evitar posibles problemas de drenaje, lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Permitir sólo una bolsa de drenaje urinario para llenar a su máxima capacidad en situaciones de emergencia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

1. Asegúrese de que la válvula de drenaje de la parte inferior / pinza pulgar es cerrado para evitar derrames.
2. Envuelva las correas alrededor de la pierna a ambos el muslo o la pantorrilla. Si las correas son demasiado largos, corte por corte sólo la sección elástico entre el bucle para conseguir el tamaño deseado.
3. Pase los extremos de las correas con el emblema Urocare través de los ojales de la bolsa en la pierna manera que las correas correr detrás de la bolsa en la pierna como se muestra en la Figura 1.
4. Coloque la bolsa de pierna en la posición deseada en la pierna y ate los extremos de las correas juntas—las correas debe ser ajustado y confortable.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

Cerrar las correas (Velcro® sujetadores) antes de lavar. Mano o en lavadora en frío—suave/delicado. No usar blanqueador. No secar en secadora. No escurra. Secar en la sombra. No planchar. No tintoreria.

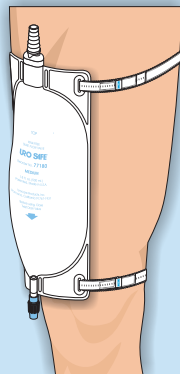


FIGURE 1