



# SANGLES UNIVERSAL JAMBE TISSU

Pour une utilisation avec la plupart de vinyle, en latex et de caoutchouc sacs de jambe urinaires

- Fournit un confort supérieur au cours sangles en latex standard
- Entièrement réglable attache auto-agrippantes en faire la demande simple et Sûre
- Sections élastiques rendre eux flexible et confortable
- Durables, réutilisables et lavables à la machine à la main ou

Une Paire **# 6390**  
Pointures 20cm à 61cm

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au **1-800-423-4441**, visiter notre site Web: [www.urocure.com](http://www.urocure.com) ou écrivez-nous un courriel.

Pour passer une commande, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé.

Urocure Products, Inc.  
Service à la Clientèle  
2735 Melbourne Avenue  
Pomona, CA 91767-1931, U.S.A.

Tel: (909) 621-6013 • Fax: (909) 621-4436 • email: [sales@urocure.com](mailto:sales@urocure.com)



S'IL VOUS PLAÎT RECYCLE  
Imprimé sur  
Papier recyclé

Fabriqués  
en Chine

PI6390FR-69601102D



## IMPORTANT! LISEZ CECI EN PREMIER:

Pour de meilleurs résultats, prendre certaines précautions avant d'utiliser ces sangles. Soyez certain qu'il n'ya pas de coutures lâches ou autres irrégularités avant chaque utilisation. Ceux qui ont connu des réactions allergiques à certains matériaux (caoutchouc néoprène en particulier) ne doit pas porter ces sangles. Cesser d'utiliser dès les premiers signes de la dermatite ou tout autre type d'irritation de la peau et de contacter immédiatement un médecin.

**ATTENTION:** Ne pas trop serrer les sangles; produits fabriqués avec élastique et/ou du matériel en caoutchouc néoprène peut—s'il est mal ajusté—restriction de circulation cause ou dégradation de la peau; toutefois, un sac attaché trop lâche peut se glisser jusque dans la jambe et de causer des dommages aux hommes externe ou cathéters de Foley en les étirant. En cas de malaise, tout en portant, cesser d'utiliser immédiatement et contactez un ajusteur ou un médecin. Pour éviter les problèmes de drainage possible, lire toutes les instructions et les précautions avant de l'utiliser. N'autorisez un sac de drainage urinaire pour remplir à sa capacité maximale en cas d'urgence.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

1. Soyez certain que la vanne de fond vidange est fermé pour prévenir les déversements.
2. Enrouler les sangles autour de la jambe sur la cuisse ou au mollet. Si les sangles sont trop longues, assiette de coupe que l'élastique entre les séparations dans la boucle pour atteindre la longueur désirée.
3. Passer l'extrémité de la sangle avec le logo Urocare® à travers le sac jambe oeillets de sorte que les sangles courir derrière le sac jambe comme le montre la figure 1.
4. Placez le sac jambe dans l'endroit désiré sur la jambe et fixer les extrémités des sangles ensemble—les sangles doivent être bien ajustées et confortables.

## INSTRUCTIONS DE LAVAGE:

Fermer sangles (attaches Velcro®) avant le lavage. Main ou en machine à laver à froid—doux/délicat. Ne pas blanchissez. Ne pas dégringolez sec. N'extorquez pas. Séchez à l'ombre. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.

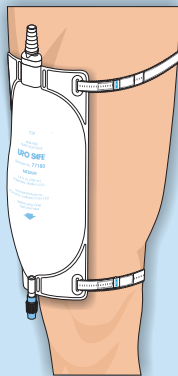


FIGURE 1